



# ASPIJECT®


Injektionsspruta för infiltrations-  
och ledningsanestesi

## ANVÄNDNING


### ANVÄNDNING

REF 2050


1.  
Skruva fast en standardnål på sprutan.

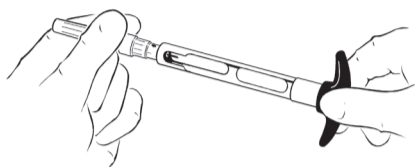


2.  
Börja med att föra in den bakre delen av ampullen för att inte riskera en felaktig (ocentrerad) punktering av ampullens gummimembran (kan orsaka vätskeläckage från ampullen under injicering).

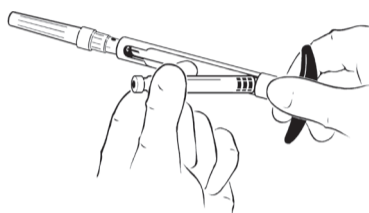

3.  
Skjut ampullen framåt i sprutan så att nålen punkterar ampullens gummimembran. Försäkra dig om att membranet blir centralt punkterat.

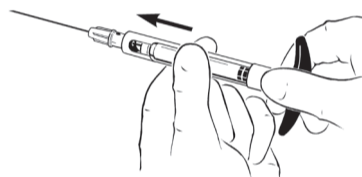


4.  
"Passiv" aspiration uppnås genom att växelvis pressa/släppa med en lätt kolvrörelse. Aspiration sker när de nedpressade gummidelarna fjädrande rekyle-  
ras, vilket skapar ett lätt negativt tryck i ampullen. Trycket är tillräckligt för att kunna se om nålspetsen oavsiktligt placerats intravaskulärt; om så är fallet kommer en "plym" att rödfärga ampullen.

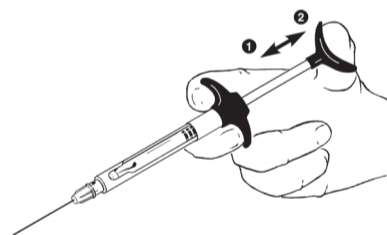

Aspirationsfunktionen är beroende av gummimembranens elasticitet, därför är inte alla tubuli lika lämpliga för användning i "passiv" aspiration.

5.  
Efter injektion, tryck den använda ampullen bakåt i sprutan och ta ur den.

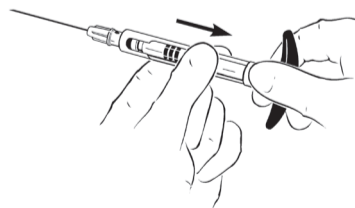

### SKÖTSEL AV SPRUTAN

Sprutan rengöras noggrant med tvål och vatten efter användning. Skölj noggrant före autoklavering.

Sprutan steriliseras i en autoclav vid 121°C i 15 min. eller vid 134°C i 3 min.

### GARANTI

ASPIJECT® har en garantitid på 5 år. Skada orsakad av oförsiktighet och felaktig hantering täcks inte av garantin.



RØNVIG Dental Mfg. A/S · Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Daugaard · Danmark  
Tlf.: +45 70 23 34 11 · Fax: +45 76 74 07 98 · E-mail: export@ronvig.com  
www.ronvig.com

