




DENTO-PREP™

ALUMIINIUMOKSIIDI MIKROPRITS

JUHEND

JUHEND

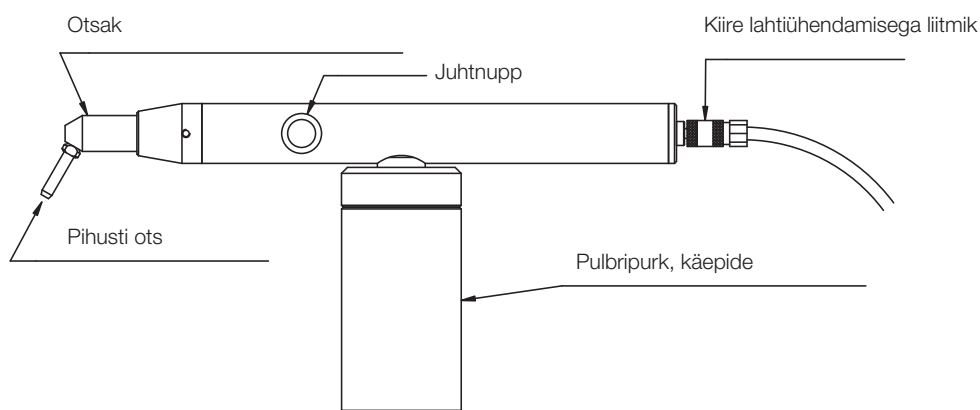

DENTO-PREP™
Osakeste mikroprits

REF 1900

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb neid juhiseid hoolikalt uurida.

Hoiatus

USA föderaalseaduse kohaselt tohivad seda seadet müüa ainult hambaarstid või hambatehnikud või eelnimetatute tellimuse täitjad.

Tootekirjeldus

DENTO-PREP™-i kasutatakse koos alumiiniumoksiidipulbriga portselani, segu- ja metallpindade mikrokarestamiseks enne tsementeerimist, et saavutada hea sidumisvõime. Seade töötab suruõhu toimel 2–8 g/cm² (30–120 psi).

On hädavajalik, et õhk oleks täiesti kuiv ja õlivaba, seega kontrollige, kas teie peaõhuvoolik on varustatud filtri ja veepüüduriga.

Paigaldamine

Saadaval on veelgi paigaldusvõimalusi, mis sobivad hambaravi asutustes ja laborites erinevatel eesmärkidel kasutamiseks.

Ühenduspesa kasutamine

DENTO-PREP™-i lihtsaks kasutamiseks on saadaval erinevaid liitmikke erinevatele turbiinide kaubamärkidele: KaVo, W&H, Sirona, BienAir ja NSK. Eemaldage turbiini käepide, suruge liitmik turbiini kiirliitmikule ja paigaldage voolik DENTO-PREP™-i külge. Kui teie turbiini käepide kuulub ülalmainitud toodetest erinevale mudelile, on turbiinivooliku 4-augulise standardvarustusega ühendamiseks saadaval Midwesti liimik. Midwesti liitmik on universaalne ja seda saab kasutada enamikes turbiinivoolikutest.

Paigalduskomplekti kasutamine

DENTO-PREP™-i paigaldamiseks otse õhuvarustusvoolikule on saadaval kaks komplekti õhuvarustusvoolikutele, mille standardlääbimõõt on 5 mm (3/16") või 6 mm (1/4"). Paigaldusjuhendid leiata paigalduskomplektide pakenditest.

Soovitatav lihvimisvahend

Alumiiniumoksiidi (Al₂O₃) pulber (osakeste suurus 20–80 µm) või silikatiseeritud Cojeti liiv (SiO(x) (3M ESPE)-st). Niiskus ja võõrkehad võivad põhjustada ummistumist.

Suuvälised rakendused:

- Mikrokarestamine, puhastamine, aktiveerimine:
 - Kroonid
 - Täidised/katted
 - Sambah
 - Marylandi sillad
 - Ortodontilised ribad ja toendid
- Vana hambatsemendi eemaldamine enne uuesti tsementeerimist
- Valatud metallrestauratsioonide sobivuse kontrollimine (kõrged kohad muutuvad silmnähtavaks)

Suusisesed rakendused:

- Mikrokarestamine enne segu või portselani liimparandusi.

Vastunäidustused:

Vältige igemetele pritsimist pehmete kudede kahjustuse riski ja õhuemfüseemi võimaliku ohu tõttu.

Ohutusabinõud

DENTO-PREP™-i kasutamisel peavad töötaja ja patsient kandma silmakaitset. Ärge kunagi suunake seadet otse näole või silmadele, vaid ainult töödeldavale pinnale. Hoidke pihustit töödeldavast pinnast 2–10 mm kaugusel.

Vältige õhus olevate lihvimisainete sisse hingamist. DENTO-PREP™-i kasutades tuleb kanda tolumumaski.

Kui DENTO-PREP™-i kasutatakse suusiseselt, on tungivalt soovitatav kasutada kummitõket, et tagada hammaste ja pehmete kudede kaitse. Suure kiirusega imemist tuleb kasutada nii, et imitoru oleks võimalikult lähedal mikropritsi kasutuspiirkonnale.

Juhised

1. Keerake lahti DENTO-PREP™-i pulbripurk, täitke see alumiiniumoksiidi pulbriga ja keerake see tagasi kinni.
2. Enne DENTO-PREP™-i esmakordset kasutamist on soovitatav katsetada erinevaid portselan-, segu- ja metallmaterjale, mis vastavad DENTO-PREP™-i rakendustele.
3. Asetage pihusti ots soovitud suunas ja hoidke seda 2–10 mm kaugusel sihtpiirkonnast.
4. Vajutage juhtnuppu ja pihustage, kuni pind on ühtlaselt karestatud. Selleks on vaja vaid mõned sekundid.
5. Kõigepealt vabastage juhtnupp ja seejärel pöörake seade sihtpiirkonnast eemale.
6. Pärast kasutamist eemaldage pulber purgist. Puhastage süsteem tagasivoolu teel, nagu on kirjeldatud allpool, ummistumise" all.
7. Ühendage voolik lahti.
8. Puhastage ja steriliseerige DENTO-PREP™-i „Puhastus-, desinfitseerimis- ja steriliseerimisjuhendi“ kohaselt. DENTO-PREP™-i ei tohi kõrge ummistumisohtu tõttu asetada vette ega mõnda muusse vedelikku.

Ummistumine

Kui DENTO-PREP™-i sees olevad õhukesed torud peaksid ummistuma, saab neid õhu tagasivoolu abil puhastada järgmiselt:

- Keerake pulbripurk lahti, asetage sõrm pihusti otsa ava peale ja vajutage juhtnuppu.

See põhjustab suruõhu tagasivoolu läbi seadme, mis kõrvaldab kõik ummistused.

Steriliseerimine

DENTO-PREP™-i (nii seadet kui ka pulbripurki) võib steriliseerida autoklaavis maksimaalselt 134 °C juures. Palun eemaldage enne steriliseerimist pulbripurk. Pärast auruga steriliseerimist tehke kindlaks, et terve DENTO-PREP™-i süsteem on enne kasutamist täiesti kuiv.

Garantii

DENTO-PREP™ on kaetud 1-aastase materjali- ja konstrueerimisgarantiiga, välja arvatud pihusti ots. RØNVIG ei vastuta kahjude või kulude eest, mis on põhjustatud ülaltoodud juhistest kõrvalekalduvast ebaadekvaatsest kasutusest või hooldusest.





DENTO-PREP™

ALUMIINIUMOKSIIDI MIKROPRITS

PUHASTAMINE, DESINFITSEERIMINE JA STERILISEERIMINE

REF 1900

Nõutavad lisamaterjalid:

- Propanool (70 %)
- Ohuvarustuse ühendus
- Imemisvahend
- Puhas paberrätik

① Seadme suruõhu teel puhastamine: Eemaldage pulbripurk seadme küljest. Asetage sõrm pihusti otsa kohale ja vajutage nuppu, et eemaldada seadmesse jäänud pulber. See põhjustab suruõhu liikumise tagasi läbi seadme ja pulbrikanali tühjendamise.


② Eemaldage pulbripurgist järelejäänud pritsimispulber. Loputage sisepind veega ja pühkige kuivaks.



③ Asetage pulbripurki 1,5–2 ml propanooli (70%). Taaskinnitage pulbripurk seadmele.



④ Suunates DENTO-PREP™-i imemisavale, vajutage nuppu lühikese aja jooksul ja laske osa sisust läbi otsaku välja pihustuda.

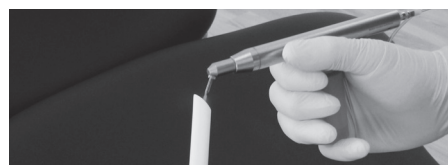

⑤ Oodake 2 minutit.

⑥ Eemaldage pulbripurk seadmest, kuivatage ja puhastage selle sisemus. Korrake 4. sammu.

⑦ Pühkige DENTO-PREP™-i välispinnad, kaasa arvatud pulbripurk. Kasutage puhast paberrätikut ja propanooli või desinfitseerimisvahendit. Enne kui pulbripurk seadme külge kinnitatakse, laske DENTO-PREP™-il ja pulbripurgil ventileeritud ruumis 5–10 minutit kuivada. Puhastatud DENTO-PREP™ on kasutamiseks valmis.

⑧ Steriliseerige DENTO-PREP™ ja pulberpurk eraldi aurusteriliseerimise autoklaavis temperatuuril 121 °C vähemalt 15 minutit või 134 °C vähemalt 3 minutit. Laske seadme osadel vähemalt 30 minutit eraldi kuivada.

