




DENTO-PREP™

ALUMÍNIUM-OXID MIKROHOMOKFÚVÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

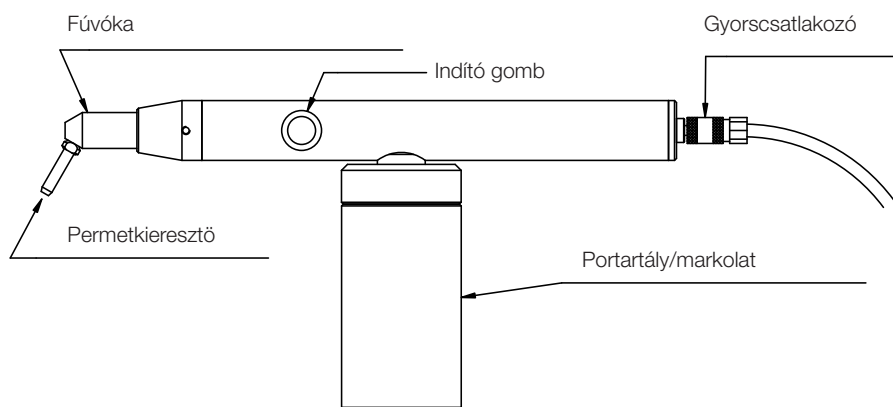

DENTO-PREP™
Homokfúvó pisztoly

REF 1900

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a készülék használata előtt.

Termékleírás

A DENTO-PREP™ alumínium-oxid por felhasználásával alkalmas - ragasztás előtt a kötésező javítása érdekében - porcelán-, kompozit- és fémfelületek mikroéresítésére. A készülék sűrtett levegővel működik (2-8 kg/cm² / 30-120 psi). Nélkülözhetetlen, hogy a levegő teljesen száraz és olajmentes legyen, ezért kérjük mindig ellenőrizze a fő levegőcsövön a szűrőt és a vízelvező csatlakozást.

Üzembe helyezés

A fogászatok és laboratóriumok különböző igényeit kielégítő üzemmódok állnak rendelkezésre.

Csatlakozók használata

A DENTO-PREP™ egyszerűen használható a rendelőkben a szék mellett. Különböző csatlakozóval rendelhető a különböző gyártmányú turbinákhoz (KaVo, W&H, Sirona, BienAir, NSK). Távolítsa el a turbinát, majd csatlakoztassa a turbina tömlőt a DENTO-PREP™ gyorscsatlakozójához. Ha az Ön turbinája nincs a fent felsoroltak között, Midwest csatlakozóval is rendelheti, mellyel könnyedén csatlakoztathatja egy standard, 4-lyukú turbinatömlőhöz. A Midwest csatlakozó univerzális, és a legtöbb turbina tömlőjével kompatibilis.

Üzembe helyezési egység (Installation Kit) használata

A DENTO-PREP™-et közvetlenül csatlakoztathatja a levegőbefúvó csőre. Kétféle, standard átmérőjű egység kapható: 5 mm (3/16") vagy 6 mm (1/4"). A beüzemeléshez szükséges használati utasítást az Installation Kit tartalmazza.

Ajánlott érdesítő anyag

Alumínium-oxid (Al_2O_3) por (szemcseméret 20-80 mikron) vagy szilícium-oxid tartalmú ($SiO(x)$) Cojet por a 3M Espe-től. Nedvesség és szennyező szemcsék csomósodáshoz vezethetnek.

Extra-orális alkalmazás

- Mikroérdesítés, tisztítás és aktiválás:
 - koronák
 - inlay/onlay-ek
 - csapok
 - hidak
 - ortodontiai gyűrűk és bracketek esetén
- Korábbi ragasztóanyagok eltávolítása új ragasztás előtt
- Fém restaurációk illeszkedésének ellenőrzése (magasabb pontok jól észrevehetők)

Intra-orális alkalmazás

- Kompozit- és porcelánmunkák ragasztását megelőző mikroérdesítésre

Kontraindikációk:

Kerülje az íny fújását a légyszövetek sérülése és a lehetséges levegő emfizéma kialakulása miatt.

Biztonsági előírások

A beavatkozást végző személy és a páciens is viseljen védőszemüveget a DENTO-PREP™ használata közben. Soha ne irányítsa közvetlenül az arcra, szemre, kizárólag a kezelendő területre. Tartsa a fúvókát közel (2-10 mm) a kezelendő területhez. A levegőbe kerülő részecskéket ne lélegezze be. Használjon arcmaszkot a DENTO-PREP™ használata során. Intra-orális használat során a fogak és a lágyszövetek védelme érdekében kofferdam gumi használata javasolt. Nagyteljesítményű elszívó (exhaustor) használata kötelező – tartsa az elszívó végét a kezelt területhez olyan közel, amennyire csak lehetséges.

DENTO-PREP™ használata

1. csavarja le a portartályt, töltsse fel alumínium-oxid porral, majd csavarja vissza
2. az első használat előtt javasolt a DENTO-PREP™ megfelelő beállításainak tesztelése porcelán, kompozit és fémfelületeken
3. irányítsa a szórófejet a kezelendő felületre, majd tartsa 2-10 mm-re a területtől
4. nyomja meg az indító gombot, és a megfelelő, egyenletes érdesség eléréséig tartsa lenyomva. Néhány másodperc elegendő.
5. engedje el a gombot, majd fordítsa el a készüléket a kezelt területtől
6. használat után ürítse ki a portartályt. Tisztítsa a rendszert a „Dugulás” részben leírtak szerint.
7. húzza ki a tömlőt
8. A tisztítást és sterilizálást a DENTO-PREP™ által előírt tisztító, fertőtlenítő és sterilizáló előírásainak megfelelően végezze el. A DENTO-PREP™-et ne helyezze vízbe, vagy más folyadékba, mert eldugulhat.

Dugulás

Amennyiben a készülék belsejében található vékony cső eldugul, tisztítsa visszaáramoltatott levegővel a következőképpen:

- csavarja le a portartályt, helyezze az ujját a fúvókára, és nyomja meg az indítógombot
- Ezáltal a sűrített levegő visszafelé áramlik majd az egységben, eltávolítva a dugulást.

Sterilizálás

A DENTO-PREP™ autoklávban sterilizálható max. 134 °C-on. Sterilizálás előtt csavarja le a portartályt. Gőzsterilizálás után, minden használat előtt győződjön meg róla, hogy a DENTO-PREP™ minden egysége teljesen száraz.

Garancia

A DENTO-PREP™ készülékre egy évre kiterjedően a termék anyagára, illetve összeszerelésére vállalunk jótállást, kivéve a fúvókát. A RØNVIG nem vállal felelősséget a felhasználói útmutatónak nem megfelelő használatból, karbantartásból, kezeléssel, az elővigyázatosság hiányából eredő hibák esetén.





DENTO-PREP™

Alumínium-oxid homokszóró

TISZTÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS ÉS STERILIZÁLÁS

REF 1900

Szükséges extra anyagok:

- Propanol (70%)
- Szívás
- Táplevegő-csatlakozás
- Tiszta papírtörölő

1 Az egység visszamosása: Válassza le a portartályt a készülékről. Tegye az ujját a szórócsúcs végére, és a készülékben maradt por eltávolításához nyomja le a gombot. Ezáltal a sűrített levegő visszaáramlik a készüléken keresztül, és kitisztítja a porcsatornát.

2 Távolítsa el a maradék homokszóró port a portartályból. Öblítse át a belső felületet vízzel, és törölje szárazra.



3 Tegyen 1,5–2 ml propanolt (70%) a portartályba. Erősítse vissza a portartályt a készülékre.



4 Miközben a DENTO-PREP™-et a szívónyílás felé irányítja, nyomja meg a gombot egy rövid sorozatra, és permetezzen ki egy kis anyagot a fúvókán keresztül.



5 Várjon 2 percet.

6 Válassza le a portartályt a készülékről, tisztítsa meg, és szárítsa ki a belsejét. Hajtsa végre a 4. lépésben leírt műveletet.

7 Törölje le a DENTO-PREP™ és a portartály külső felületeit. Ehhez használjon tiszta papírtörölőt és propanolt, vagy fertőtlenítő kendőt. Hagyja száradni a DENTO-PREP™-et és a portartályt 5–10 percig szellős helyen, mielőtt visszaerősítené a portartályt a készülékre. A megtisztított DENTO-PREP™ használatra kész.

8 Sterilizálja a DENTO-PREP™-et és a portartályt egymástól elkülönítve egy gőzsterilizáló autoklávban 121 °C-on / 250 °F-on legalább 15 percig, vagy 134 °C-on / 275 °F-on legalább 3 percig. Hagyja, hogy az alkotórészek egymástól elkülönítve száradjanak legalább 30 percig.

