




DENTO-PREP™

PRIPOMOČEK ZA PESKANJE Z ALUMINIJEVIM OKSIDOM

NAVODILA

NAVODILA

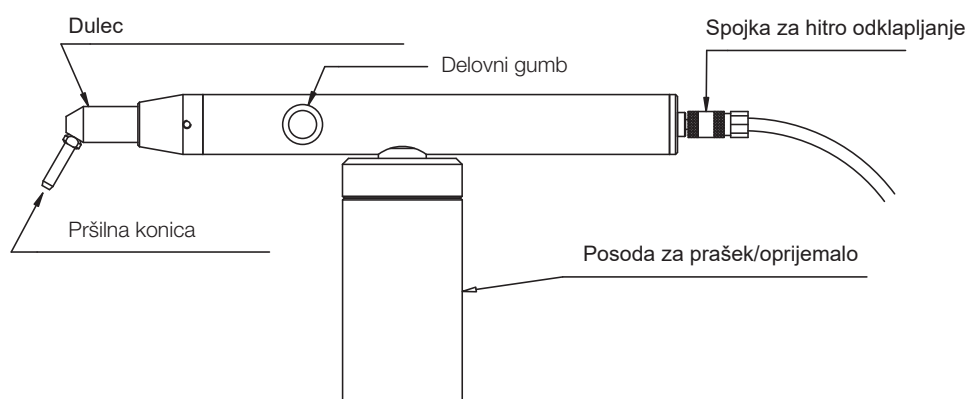

DENTO-PREP™

Pripomoček za peskanje z delci

REF 1900

Pred začetkom uporabe pripomočka natančno preberite navodila.

Pozor

Zvezna zakonodaja ZDA omejuje prodajo tega pripomočka zobozdravnikom ali zobnim tehnikom oziroma na njihovo naročilo.

Opis izdelka

Pripomoček DENTO-PREP™ se uporablja skupaj z aluminijevim oksidom v prahu za mikrohrapavljenje površin iz porcelana, kompozita in kovine pred cementiranjem, da je moč veziva večja. Pripomoček deluje s stisnjenim zrakom pri tlaku od 2 do 8 kg/cm² (30–120 psi). Zrak mora biti popolnoma suh in ne sme vsebovati sledov olja, zato preverite, da je glavni dovod zraka opremljen s filtrom in lovilcem vode.

Namestitev

Na voljo je več možnosti namestitve, ki ustrezajo različnim potrebam v zobozdravstvenih ordinacijah in laboratorijih.

Uporaba priključka

Za preprosto uporabo pripomočka DENTO-PREP™ v ordinaciji so na voljo različni priključki za različne blagovne znamke turbin: KaVo, W&H, Sirona, BienAir in NSK. Odstranite ročnik turbine, potisnite priključek na hitri turbinski priključek in cev priključite na pripomoček DENTO-PREP™. Če je vaš turbinski ročnik blagovne znamke, ki ni navedena zgoraj, je za priključevanje na standardni pritrdilni element turbinske cevi s 4 zatiči na voljo priključek Midwest. Priključek Midwest je univerzalen in se lahko uporablja pri večini turbinskih cevi.

Uporaba namestitvenega kompleta

Pri namestitvi pripomočka DENTO-PREP™ neposredno na linijo za dovod zraka sta na voljo dva kompleta za cevi za dovod zraka s standardnima premeroma 5 mm (3/16") in 6 mm (1/4"). Navodila za namestitev so priložena v pakiranje kompletov za namestitev.

Priporočeni abrazivi

Aluminijev oksid (Al_2O_3) v prahu (velikost delcev 20–80 μm) ali pesek Cojet s silicijevim oksidom ($SiO(x)$) družbe 3M ESPE). Vlaga in tujki lahko povzročijo zamašitev.

Ekstraoralna uporaba:

- Mikrohrapavljenje, čiščenje in aktiviranje
 - kron
 - inlejev/onlejev
 - zatičev
 - mostičkov Maryland
 - ortodontskih trakov in nosilcev
- Odstranjevanje starega cementa pred ponovnim cementiranjem
- Preverjanje prileganja ulitih kovinskih restavracij (višji deli postanejo vidni)

Intraoralna uporaba:

- Mikrohrapavljenje pred adhezivnimi popravili kompozita ali porcelana

Kontraindikacije:

Zaradi tveganja za poškodbe mehkega tkiva in morebitnega tveganja za zračni emfizem se izogibajte peskanju dlesni.

Varnostni ukrep

Med uporabo pripomočka DENTO-PREP™ morata upravljavec in bolnik nositi zaščito za oči. Pripomočka nikoli ne usmerite neposredno v obraz ali oči, pač pa le v obdelovano površino. Pršilo držite blizu ciljne površine na razdalji 2–10 mm. Izogibajte se vdihavanju aerogenih abrazivnih sredstev. Pri vsaki uporabi pripomočka DENTO-PREP™ je treba nositi protiprašno masko. Ob intraoralni uporabi pripomočka DENTO-PREP™ je zelo priporočljiva uporaba gumijaste opne, ki zavaruje zobe in mehka tkiva. Uporabiti morate visokohitrostno sesanje in sesalno konico čim bolj približati predelu, ki ga obdelujete z mikropeskanjem.

Navodila

1. S pripomočka DENTO-PREP™ odvijte posodo s praškom, napolnite jo z aluminijevim oksidom v prahu in jo privijte nazaj.
2. Pred prvo uporabo pripomočka DENTO-PREP™ ga je priporočljivo preskusiti na različnih materialih, narejenih iz porcelana, kompozita in kovine, ki so namenjeni uporabi s pripomočkom DENTO-PREP™.
3. Pršilno konico usmerite v zeleno smer in jo držite 2–10 mm stran od ciljnega predela.
4. Pritisnite delovni gumb in pršite, dokler površina ni enakomerno hrapava. Potrebujete le nekaj sekund.
5. Sprostite gumb in ga usmerite stran od ciljnega predela.
6. Po uporabi prašek odstranite iz posode. Sistem očistite s povratnim tokom zraka, kot je opisano spodaj v razdelku "Zamašitev".
7. Odklopite cev.
8. Pripomoček DENTO-PREP™ očistite in sterilizirajte v skladu z "Navodili za čiščenje, dezinfekcijo in sterilizacijo". Pripomočka DENTO-PREP™ ne smete namakati v vodi ali drugi tekočini, saj se lahko zamaši.

Zamašitev

Če se tanke cevke v pripomočku DENTO-PREP™ zamašijo, jih lahko očistite s povratnim tokom zraka, kot sledi:

- Odvijte posodo s praškom, položite prst na odprtino pršilne konice in pritisnite delovni gumb.

Stisnjeni zrak bo šel nazaj skozi enoto in očistil vse blokade.

Sterilizacija

Pripomoček DENTO-PREP™ (enoto in posodo s praškom) lahko sterilizirate v avtoklavu pri največ 134 °C. Posodo s praškom pred sterilizacijo odvijte. Po sterilizaciji s paro preverite, da je celoten sistem DENTO-PREP™ popolnoma suh, preden ga uporabite.

Garancija

Za pripomoček DENTO-PREP™, razen za pršilno konico, velja enoletna garancija za material in konstrukcijo. Družba RØNVIG ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali izgubo, ki so posledica neprimerne uporabe ali nege, ki odstopa od zgoraj navedenih navodil.





DENTO-PREP™

Pripomoček za mikropeskanje z aluminijevim oksidom

ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJA IN STERILIZACIJA

REF 1900

Potrebni dodatni materiali:

- propanol (70 %)
- pripomoček za sesanje
- priključek za dovod zraka
- čista papirnata brisača

1 Sperite enoto s povratnim tokom: s pripomočka odstranite posodo s praškom. Na konec pršilne konice namestite prst in pritisnite gumb ter tako odstranite ves preostali prašek v pripomočku. Stisnjeni zrak se bo tako vračal nazaj skozi pripomoček in bo očistil kanal za prašek

2 Iz posode za prašek odstranite ves preostali prašek za peskanje. Notranjo površino sperite z vodo in obrišite do suhega.

3 V posodo za prašek nalijte 1,5–2 ml propanola (70 %). Posodo za prašek ponovno pritrdite na pripomoček.

4 Pripomoček DENTO-PREP™ naj bo usmerjen v sesalno odprtino, pri tem pa na kratko pritisnite gumb in skozi tulec spustite nekaj vsebine razpršila.

5 Počakajte 2 minuti.

6 Posodo s praškom snemite s pripomočka, jo očistite in osušite od znotraj. Ponovite postopek, opisan pod točko 4.

7 Obrišite zunanje površine pripomočka DENTO-PREP™, vključno s posodo za prašek. Uporabite čisto papirnato brisačo in propanol ali pa dezinfekcijsko krpico. Preden posodo za prašek ponovno pritrdite na pripomoček DENTO-PREP™, naj se pripomoček in posoda za prašek sušita 5–10 minut v zračenem območju. Očiščeni pripomoček DENTO-PREP™ je pripravljen za uporabo.

8 Pripomoček DENTO-PREP™ in posodo za prašek sterilizirajte ločeno v parnem sterilizatorju, in sicer vsaj 15 minut pri temperaturi 121 °C ali vsaj 3 minute pri temperaturi 134 °C. Deli naj se sušijo ločeno vsaj 30 minut.

