




# DENTO-PREP™

## DUST-CABINET

### ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

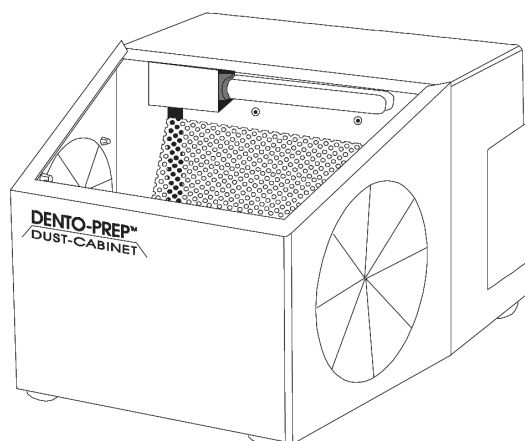

**REF** 1903: 230 VAC/50-60 Hz 30 W

#### Utilizzo

DUST-CABINET DENTO-PREP™ viene utilizzato per procedimento di sabbatura con DENTO-PREP™. Ulteriori utilizzi sono sotto la re-sponsabilità dell'operatore.

#### Preparazione

Inserire la lampada in dotazione, collegare il cavo di alimentazione e il DUST-CABINET è pronto per l'uso. Il pannello del DUST-CABINET può essere tolto spingendolo e facendolo scorrere verso l'alto.

#### Manutenzione

Si consiglia di pulire regolarmente il DUST-CABINET: togliere il pannello e rimuovere la polvere con un aspiratore.

DUST-CABINET è dotato di un filtro per la polvere che protegge il sistema di aspirazione elettronico integrato nell'apparecchio dalla polvere aspirata all'interno. Il filtro deve essere estratto e pulito regolarmente con un aspiratore.

Togliere il filtro attraverso l'apposito sportellino posto sul lato dell'apparecchio.

#### Individuazione dei guasti

La luce non funziona = sostituire la lampadina  
 La luce non si accende  
 e il prodotto non aspira = sostituire il fusibile  
 L'aspirazione è debole = pulire il filtro

#### Informazione agli Utenti

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

#### Specifiche tecniche

Dimensioni: Altezza 180 – larghezza 225 – profondità 315  
 Peso: 4130 grammi  
 Potenza: Articolo n° 1903: 230 VCA/50-60 Hz 30 W  
 Lampadina: PL-S 4P 9W 600 lumen, 840  
 Fusibile: 1AT  
 Materiali: Involucro esterno dell'apparecchio:  
 acciaio verniciato a polvere  
 Pannello: Vetro temprato

