




DENTO-PREP™

DUST-CABINET

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

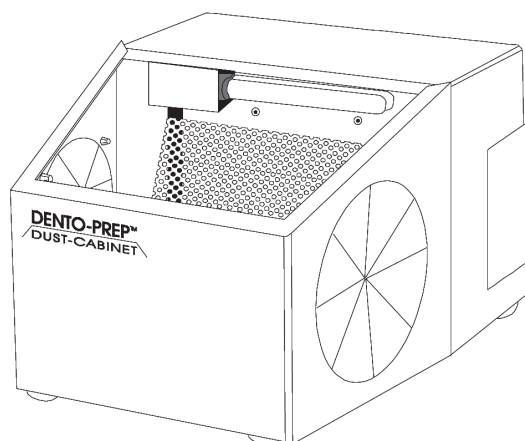

REF 1903: 230 VAC/50-60 Hz 30 W

Paskirtis

DENTO-PREP™ smėliadėžė DUST-CABINET skirta darbui su DENTO-PREP™ smėliasrove. Dėžės naudojimas kitiems tikslams yra operatoriaus atsakomybė.

Paruošimas

Įsukite komplekte pridėtą lemputę, prijunkite maitinimo kabelį ir jūsų smėliadėžė DUST-CABINET paruošta naudoti. Smėliadėžės DUST-CABINET langelį galima nuimti jį paspaudžiant ar stumiant aukštyn.

Priežiūra

Smėliadėžė DUST-CABINET rekomenduojama reguliariai valyti išimkite langelį ir ištuštinkite naudotus miltelius.

Smėliadėžėje DUST-CABINET yra filtras, kuris apsaugo įmontuotą elektroninę siurbimo sistemą nuo miltelių, kurie yra įpučiami į dėžę. Filtras turi būti reguliariai išimamas ir išvalomas (išsiurbiamas). Filtrą galima išimti per mažąjį liuką, esantį dėžės šone.

Gedimų nustatymas

Nėra šviesos = pakeiskite lemputę.
Nėra šviesos ir neveikia siurbimas = pakeiskite saugiklį.
Sumažėjęs siurbimas = išvalykite filtrą.

Techninė informacija

Matmenys, mm: A 180 - P 225 - G 315
Svoris: 4130 gram
Galia: Nr. 1903: 230 VAC/50-60 Hz 30 W
Lemputė: PL-S 4P 9W 600 lumen, 840
Saugiklis: 1AT
Medžiaga: Dėžė: miltelinio būdu dengtas plienas
Langelis: Grūdintas stiklas

