



ASPIJECT®

Active

Jeringa de inyección para infiltración y anestesia de bloqueo con aspiración activa


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


- 1 El gancho espiral en el pistón es muy afilado así que, para protegerse, extraiga el émbolo para que el gancho espiral se oculte en la parte posterior de la jeringa.




- 2 El gancho espiral está ahora fuera de la vista. Manténgalo allí para evitar cortes en los dedos.

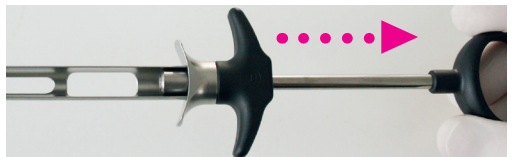

- 3 Atornille una aguja dental estándar.

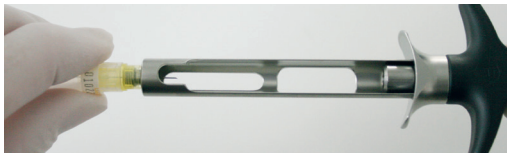

- 4 Desplace más el émbolo de modo que el retenedor de resorte desaparezca en la parte posterior de la jeringa. Inserte un cartucho con el extremo trasero primero.

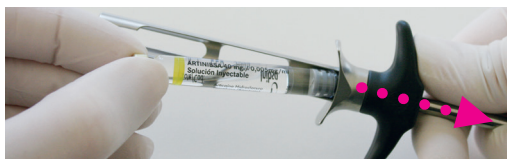

- 5 Enganche las espirales al tapón de goma de cartucho girando el émbolo media vuelta en sentido horario.



- 6 La aspiración activa se logra tirando hacia atrás del émbolo



- 7 Después de la inyección, desatornille la aguja y extraiga el émbolo completamente tirando hacia atrás. Retire el cartucho dejándolo caer en la otra mano.



ASPIJECT® Active

REF 2070

CUIDADO DE LA JERINGA

Al igual que todos los instrumentos de acero inoxidable, la jeringa debe limpiarse cuidadosamente antes de la esterilización (las soluciones anestésicas son muy ácidas).

La jeringa se esteriliza por cualquier método (máx. 200 °C/392 °F)

GARANTÍA

ASPIJECT® tiene una garantía de 5 años. Los daños debidos a un cuidado o tratamiento inadecuados, no están cubiertos por la garantía.



RØNVIK Dental Mfg. A/S · Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Daugaard · Dinamarca
Tel.: +45 70 23 34 11 · Fax: +45 76 74 07 98
E-mail: export@ronvig.com · www.ronvig.com

