



# ASPIJECT®

Seringa de injeção dentária, auto-aspirante

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

REF 2050

1.

#### Adaptar uma agulha dentária


Apega não rotativa permite a colocação da agulha com o bisel na orientação correcta para a localização esperada do osso

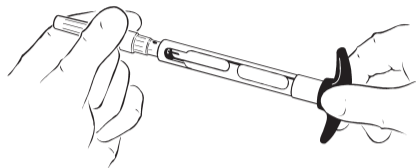

2.

#### Inserir a "cartridge"


Em primeiro lugar a extremidade posterior, para evitar a perfuração fora do centro. A punção da membrana no centro previne os riscos de fuga durante a injeção.

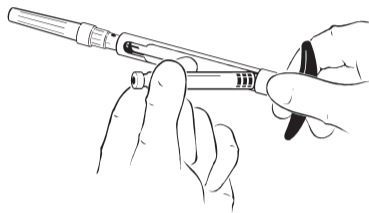

3.

#### Empurrar a "cartridge" para a frente


imediatamente antes da injeção, para permitir que a agulha perfure a membrana. Se a seringa for deixada carregada, antes ou durante o tratamento, a "cartridge" deve ser afastada do contacto com a agulha, para evitar a contaminação da solução com iões metálicos.

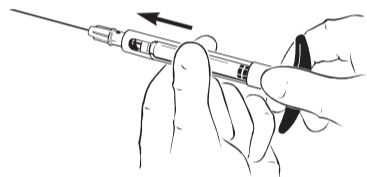

4.


#### Aspiração

É conse guida exercendo uma ligeira pressão no piston e aliviando-a. O recuo elástico da membrana da "cartridge" - quando empurrada contra a saliência existente na base da seringa - cria a pressão negativa na "cartridge" que assegura uma franca aspiração.

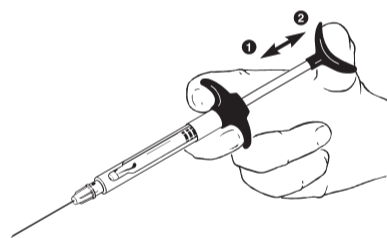

5.

**Para descarregar a seringa** deslizar para trás a "cartridge", afastando-a da agulha, inverter a seringa e remover a "cartridge". Com a seringa ainda nas mãos do operador, é fácil a inserção de uma segunda "cartridge", pelo assistente, para injeção no mesmo paciente. Tal permite ao operador manter os olhos e a concentração no paciente.

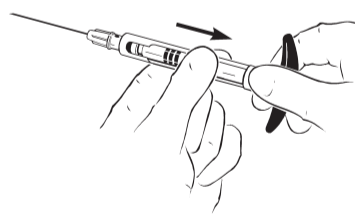

### MANUTENÇÃO DA SERINGA

Como todos os instrumentos de aço inoxidável, a seringa deve ser cuidadosamente limpa antes de esterilização (as soluções anestésicas são muito ácidas).

Quando necessário, lubrificar o piston com óleo de silicone.

Esterilize em autoclave de esterilização a vapor a 121° C / 250° F por 15 minutos ou a 134° C / 275° F por 3 minutos.

### GARANTIA

ASPIJECT® é garantida por 5 anos. Não estão cobertos por esta garantia danos resultantes de manutenção inadequada ou utilização incorrecta.

