

# Instrumente für Injektion




## ASPIJECT® Active

Injektionsspritze für die Infiltrations- und Leitungsanästhesie. Art. Nr. 2070

Manuelle Aspiration. Die Spritze ist mit einem ergonomischen Ring-Griff zum Zurückziehen des Spritzenstempels und einem selbstschneidenden Spiralhaken ausgestattet. Aus hochwertigem, säurebeständigem Edelstahl und wärmbeständigem Polymer.

- aus hochgradigem rostfreien Edelstahl und Hightech Polymer
- ausgestattet mit einer spiralförmigen selbstschneidenden Haken, der in den Kolben eingreift
- für jede Sterilisationsart geeignet
- hygienisch durch glatte und ebene Flächen
- für den Gebrauch mit handelsüblichen Zylinderampullen und Kanülen geeignet
- 5 Jahre Herstellergarantie auf Material und Verarbeitung

ASPIJECT® Active

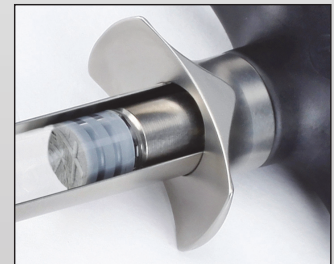

Hersteller:

 **RÖNVIG**  
Dental Mfg. A/S

Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Daugaard · Danmark  
Tel.: (+45) 70 23 34 11 · Fax: (+45) 76 74 07 98  
e-mail: export@ronvig.com · www.ronvig.com